

KUKINI™

Speciální kočárek



www.akces-med.com

Uživatelský návod



UPOZORNĚNÍ!

Výrobce přebírá odpovědnost za správné používání zařízení pouze tehdy, pokud byl výrobek zakoupen od kvalifikovaného pracovníka společnosti Akces-MED Ltd. nebo ve specializované prodejně zdravotnických prostředků.

Společnost Akces-MED Ltd. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět technické a obchodní změny v obsahu návodu.




Výrobek označený značkou CE je zdravotnickým prostředkem třídy I podle pravidla 1 a splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích.



Společnost Akces-MED Ltd. zavedla systém řízení kvality ISO 13485 pro výrobu, prodej a servis. Systém je certifikován společností SGS.

The system is certified by SGS.

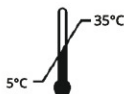

Obsah

Úvod	4
1. Účel uživatelského návodu	5
2. Indikace a kontraindikace použití	5
3. Obecná charakteristika kočárku	7
4. Tabulka velikostí	8
5. Jak kočárek používat	9
5.1 Rozložení kočárku	9
5.2 Složení kočárku	10
5.3 Opěrka nohou	11
5.4 Demontáž kol	12
5.5 5bodové bezpečnostní pásy	13
5.6 Nastavitelné opěradlo	16
5.7 Madlo pro doprovod	17
5.8 Centrální brzda	17
5.9 Ruční brzda	17
5.10 Nastavení pružin	20
6. Používání kočárku	21
6.1 Příprava uživatele	21
6.2 Příprava kočárku	22
7. Bezpečnostní pravidla	23
8. Záruční podmínky	25
9. Údržba a čištění	25
10. Označení	29

Úvod

Speciální kočárek KUKINI™ je řešením pro osoby, které hledají pohodlí, bezpečnost a stabilitu pro své děti a zároveň s nimi chtějí aktivně trávit čas při procházkách nebo běhu.

Díky nízké hmotnosti je KUKINI™ vhodný jak pro dlouhé procházky, tak pro běžecký trénink. Je určen pro uživatele s výškou 100 až 135 cm a maximální hmotností 40 kg (velikost 1) a pro uživatele s výškou 130 až 165 cm a maximální hmotností 65 kg (velikost 2).

Nastavitelné opěradlo umožňuje nastavit optimální polohu vsedě nebo v pololehu. Poskytuje pohodlí a bezpečnost při přepravě i každodenní rehabilitaci osob, které ze zdravotních důvodů nejsou schopny samostatně sedět nebo stát.

Široká nabídka vybavení umožňuje přizpůsobit kočárek tak, aby poskytoval odpovídající pohodlí uživateli i doprovodu. KUKINI™ umožňuje aktivně trávit čas společně s dítětem.

Pečlivě si přečtěte tento uživatelský návod. Najdete v něm nejen užitečné informace, ale také pokyny pro bezpečné a účinné používání výrobku.

V případě dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat:

Zdravotní poradce: +48 516 183 883

Akces-MED Ltd.: +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com

UPOZORNĚNÍ!

Před použitím výrobku je uživatel povinen seznámit se s uživatelským návodem.

Dodržování uvedených pokynů je velmi důležité - zajišťuje bezpečnost a prodlužuje životnost i zachování vzhledu zařízení.

1. Účel uživatelského návodu

UPOZORNĚNÍ!

Návod obsahuje základní informace potřebné pro správnou přípravu kočárku před použitím, jeho používání, údržbu a čištění.

Tento návod uchovávejte na snadno dostupném místě. Je určen osobám pečujícím o uživatele se zdravotním postižením a také lékařům a fyzioterapeutům, kteří s kočárkem pracují.

Před prvním použitím kočárku je uživatel (nebo pečující osoba) povinen seznámit se s tímto návodem.

2. Indikace a kontraindikace použití

Tyto zdravotnické prostředky jsou určeny osobám s ortopedickými, neurologickými a kardiologickými onemocněními a osobám po chirurgických zákrocích s poruchami pohybového aparátu, které nezávisle schopnost samostatně sedět nebo mají potíže se zaujetím a udržením polohy vsedě.

Zařízení je vhodné jak pro osoby s ochablostí a sníženým svalovým tonem, tak pro osoby se spasticitou. Může být také užitečné pro osoby, které vyžadují dlouhodobé odlehčení jedné nebo obou dolních končetin. Je významnou pomůckou v rehabilitačním procesu z hlediska pohybu i sociální integrace. Pomáhá při každodenních činnostech, jako je rehabilitace, hra, studium nebo stravování. Volba správné velikosti závisí na zdravotních indikacích a anatomických parametrech, nikoli na věku uživatele.

Zařízení se doporučuje zejména v těchto případech:

- dětská mozková obrna - různé typy a formy,
- poranění mozku a míchy s ochrnutím a oslabením dolních končetin, poruchami rovnováhy a motorické koordinace různé etiologie,
- demyelinizační onemocnění (např. roztroušená skleróza - RS),
- meningokéla,
- svalová onemocnění s oslabením a ochrnutím (dystrofie, myasthenia gravis, myozitida),
- genetická onemocnění,
- degenerativní a neurologická onemocnění,
- další stavy spojené se svalovou slabostí, ochrnutím a poruchami pohybového aparátu,
- stav po poranění hlavy a míchy a po úrazech páteře s ochrnutím a parézou.

Kontraindikace pro polohu vsedě:

- kritický stav uživatele,
- ochrnutí,
- hluboká sedace,
- nestabilní zlomeniny se specifickým ortopedickým režimem, včetně zlomenin páteře,
- neléčená hluboká žilní trombóza,
- hemodynamická nestabilita,
- zjištěná porucha mozkových funkcí při vzpřímeném sedu,
- těžká artritida krční páteře,
- plicní embolie,
- nedávný infarkt myokardu v posledních 24 hodinách,
- čerstvé pooperační rány nebo nehojící se rány v oblasti zad, pánevního pletence, kyčelních kloubů a stehen,
- uživatelé s duševními poruchami nesmějí být ponecháni v zařízení bez dohledu pečující osoby.

3. Obecná charakteristika kočárku

ERGONOMICKÉ MADLO PRO
DOPROVOD

BEZPEČNOSTNÍ
POUTKO
NA ZÁPĚSTÍ

ODNÍMATELNÁ NAFUKOVACÍ
ZADNÍ KOLA

ODNÍMATELNÉ NAFUKOVACÍ PŘEDNÍ KOLO

OPĚRADLO S NASTAVITELNÝM ÚHLEM
SKLONU
A ÚLOŽNOU KAPSOU

5BODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
S MAGNETICKOU SPONOU

SEDÁK
S PĚNOU
WITH VI
Vismemo™

NASTAVITELNÁ
OPĚRKA NOHOU
FOOT REST

SKLÁDACÍ HLINÍKOVÝ RÁM S KOTOUČOVOU BRZDOU
PŘEDNÍHO KOLA A CENTRÁLNÍ BRZDOU ZADNÍCH
KOL


BATOH VOYAGER



INFORMACE

Příslušenství pro KUKINI je dostupné na webu: en.akces-med.com/product/kukini/

4. Tabulka velikostí

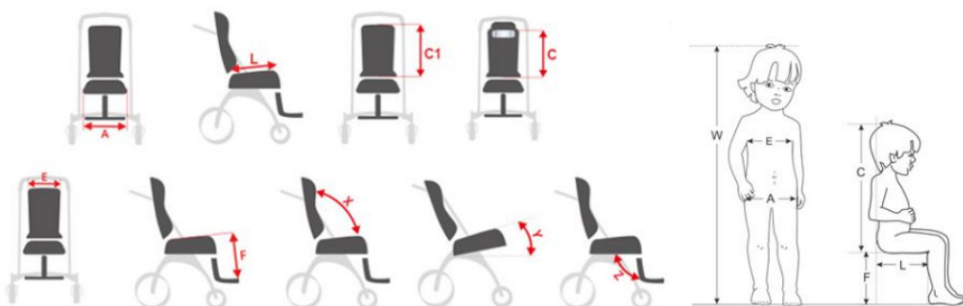

Symbol	Rozměr	Jedn.	Vel. 1	Vel. 2
W	orientační výška uživatele *	cm	100 - 135	130 - 165
A	šířka sedu	cm	37	43
L	hloubka sedu	cm	37	41
C	výška opěrky hlavy	cm	47 - 60	60 - 78
C1	výška opěradla	cm	60	78
E	šířka opěradla	cm	36	42
F	délka opěrky nohou	cm	27, 40	35, 45
	výška madla pro doprovod	cm	90 - 120	87 - 135
X	úhel sklonu opěradla	°	95 - 130	95 - 130
Y	úhel sklonu sedu	°	20	20
Z	úhel sklonu opěrky nohou	°	125	125
	maximální hmotnost uživatele	kg	40	65

Hmotnost a rozměry		Jedn.	Vel. 1	Vel. 2
šířka		cm	67	74
šířka po složení **		cm	54	60
délka - minimum		cm	124	141
délka - maximum		cm	143	169
délka po složení **		cm	97	103
výška		cm	105	107
výška po složení **		cm	38	38
hmotnost ***		kg	14	16,5

Poznámka: tolerance měření je +/- 1 cm / 1/2 in.

* Tento rozměr nesmí být hlavním parametrem při volbě velikosti výrobku.

** Rozměry po složení jsou uvedeny pro kočárek s demontovanými koly a odepnutou opěrkou nohou.

*** Hmotnost se standardním vybavením.

5.1 Rozložení kočárku

INFORMACE

Kočárek umožňuje demontáž kol. Tím lze zmenšit rozměry výrobku a usnadnit přepravu nebo skladování. Montáž kol je znázorněna na straně 12 návodu.



UPOZORNĚNÍ!

Věnujte zvláštní pozornost skládacím částem rámu kočárku, protože představují riziko poranění. Mezi pohyblivými částmi kočárku nesmí být zachyceno čalounění.

Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně zajištěny a čalounění je správně upevněno. Při skládání může dojít k nechtěnému rozeptnutí upevňovacích prvků čalounění. Všechny upevňovací prvky čalounění musí být bezpodmínečně zapnuté.

5.2 Složení kočárku



INFORMACE

Před zahájením skládání doporučujeme opěrku nohou sklopit dolů. Při skládání hrozí její poškození nárazem o zem.

UPOZORNĚNÍ!

Věnujte zvláštní pozornost skládacím částem rámu kočárku, protože představují riziko poranění. Mezi pohyblivými částmi kočárku nesmí být zachyceno čalounění.



INFORMACE


Nezapomeňte zajistit pojistný mechanismus, aby se kočárek samovolně nerozložil.

Kočárek umožňuje demontáž kol, čímž lze zmenšit rozměry výrobku a usnadnit přepravu nebo skladování - viz 5.4 Demontáž kol, strana 12.

5.3 Opěrka nohou

INFORMACE

Chcete-li změnit výšku opěrky nohou, stiskněte páčky umístěné na obou stranách opěrky a použijte otvory na obou stranách. Výšku opěrky nohou lze nastavit do tří poloh. Potah opěrky nohou zajistěte zapnutím popruhu za konstrukcí opěrky.

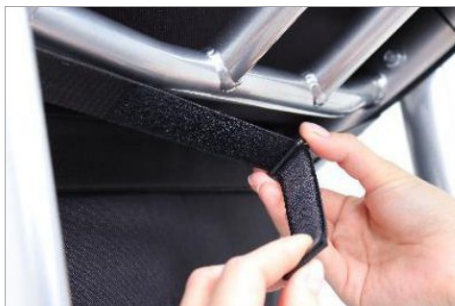

5.3 Opěrka nohou



5.4 Demontáž kol

PŘEDNÍ KOLO



ZADNÍ KOLA



5.5 5bodové bezpečnostní pásy


INFORMACE

Pásy lze upevnit v požadované výšce na opěradle kočárku. Oba horní popruhy 5bodových bezpečnostních pásů musí být upevněny ve stejné výšce. Před každým použitím kočárku 5bodové bezpečnostní pásy zapněte a zkontrolujte jejich správné upevnění.





INFORMACE




Horní popruhy se upevňují za opěradlem kočárku. Po otevření kapsy na zadní straně opěradla zajistíte horní popruhy maticemi.

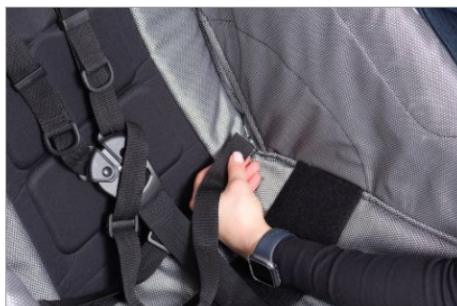

5.5 5bodové bezpečnostní pásy

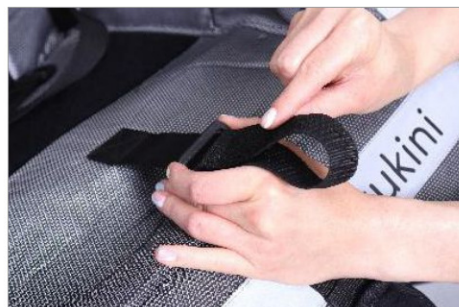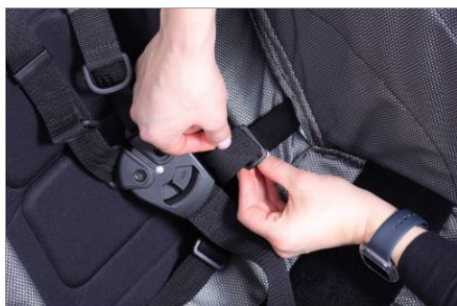

5.5 5bodové bezpečnostní pásy

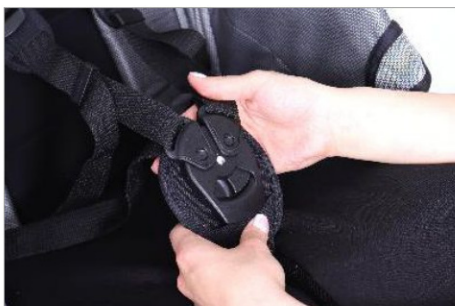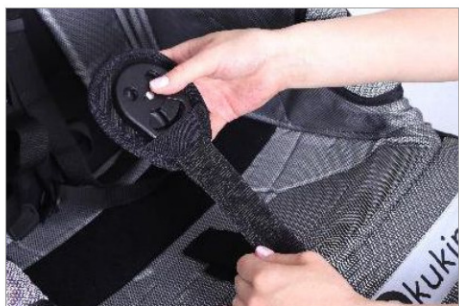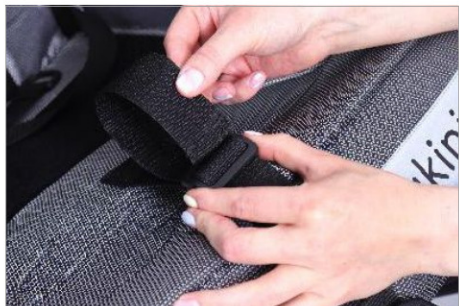


UPOZORNĚNÍ!

Před použitím kočárku zkontrolujte, zda jsou 5bodové bezpečnostní pásy správně zapnuté.

ROZEPNUTÍ 5BODOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ



5.6 Nastavitelné opěradlo

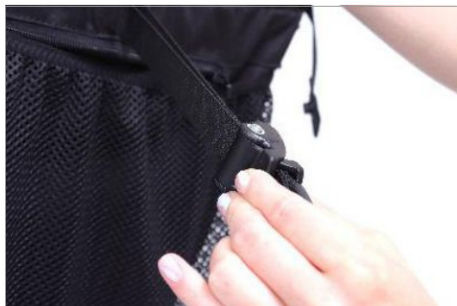

INFORMACE

Před použitím kočárku zkontrolujte, zda je zajišťovací prvek úhlu opěradla správně zajištěn. Maximální zatížení úložné kapsy za opěradlem je 1 kg.

5.7 Madlo pro doprovod



INFORMACE

Na madle kočárku je bezpečnostní poutko na zápěstí. Při nasazení pečující osobou zabraňuje nechtěnému samovolnému pohybu kočárku.

5.8 Centrální brzda



KOLA ODBRZDĚNA - VÝCHOZÍ POLOHA



KOLA ZABRZDĚNA - POLOHA STOP

UPOZORNĚNÍ!

Při zaparkování kočárku používejte pouze centrální brzdu.

5.9 Ruční brzda

UPOZORNĚNÍ!

Ruční brzda je určena pouze ke zpomalování kočárku, například při jízdě z kopce.



NASTAVENÍ RUČNÍ BRZDY

INFORMACE


Brzdové destičky se mohou používáním opotřebovat nebo změnit své nastavení - jde o běžný důsledek používání výrobku. Pokud k tomu dojde, je nutné destičky vyměnit a/nebo znovu nastavit rozteč na vnitřní i vnější straně brzdového kotouče. Schéma nastavení je na stranách 18-19 návodu.

5.9 Ruční brzda - schéma nastavení

UPOZORNĚNÍ!

Nezapomeňte nastavit mezeru na vnitřní i vnější straně. Nastavení mezery pouze na jedné straně může způsobit:

- kontakt brzdových destiček s brzdovým kotoučem,
- nedostatečný brzdný účinek,
- kontakt brzdového kotouče s brzdovým třmenem při brzdění.

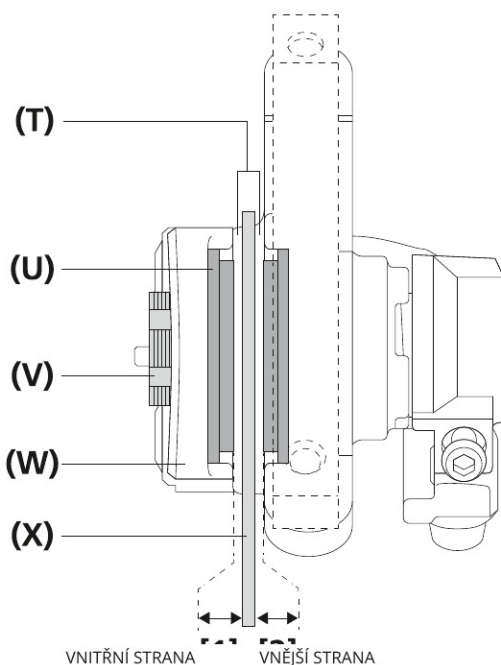

INFORMACE

Brzdové destičky lze používat, pokud mají tloušťku alespoň 0,5 mm.

- (T) MEZERA KOTOUČE
- (U) BRZDOVÁ DESTIČKA
- (V) SEŘIZOVACÍ ŠROUB DESTIČKY
- (W) TŘMEN
- (X) BRZDOVÝ KOTOUČ
- (Y) SEŘIZOVACÍ KNOFLÍK LANKA
- (Z) SEŘIZOVACÍ MATICE LANKA

KROK 1.

Vyrovnejte obě mezery mezi brzdovým kotoučem a brzdovými destičkami:

vnitřní strana [1] = vnější strana [2].

Mezera mezi destičkami [1] [2]: 0,2-0,5 mm.


5.9 Ruční brzda - schéma nastavení

VNITŘNÍ STRANA

KROK 2.

Nastavte pomocí seřizovací šroubu brzdové destičky.

(V) SEŘIZOVACÍ ŠROUB DESTIČKY

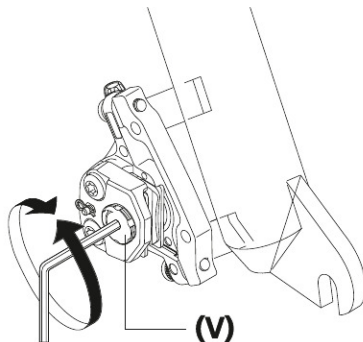



VNĚJŠÍ STRANA

KROK 3.

Nastavte otáčením seřizovacích knoflíků lanka na třmenech a brzdových pákách.

(Y) SEŘIZOVACÍ KNOFLÍK LANKA

(Z) SEŘIZOVACÍ MATICE LANKA

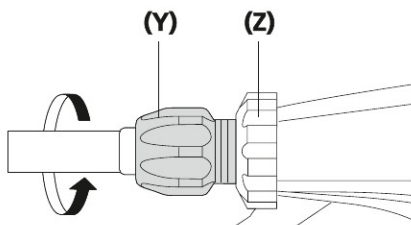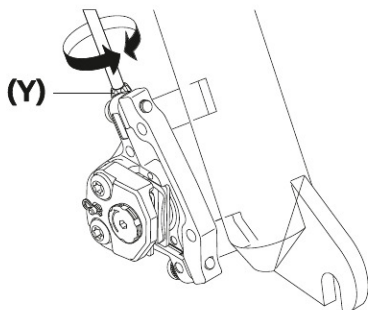

5.10 Nastavení pružin

INFORMACE

Tuhost pružin kočárku lze měnit, čímž lze konstrukci zpevnit nebo zvýšit její schopnost tlumit nárazy. Nastavení provádějte pomocí klíče, který je součástí sady.



UPOZORNĚNÍ!

Před použitím výrobku je uživatel povinen seznámit se s uživatelským návodem. Před použitím zařízení nezapomeňte připravit jak výrobek, tak uživatele.

6.1 Příprava uživatele

Před použitím výrobku je nezbytné zajistit, aby:

- oblečení uživatele bylo lehké a pohodlné; doporučuje se sportovní oblečení,
- obuv byla pohodlná a zároveň stabilizovala kotník,
- z hygienických důvodů a kvůli prevenci odřenin měl uživatel při používání zařízení vždy oblečení; pokožka nesmí být odkrytá zejména v místech pravidelného kontaktu s čalouněním,
- drény, sáčky, katétry apod., jsou-li používány, byly zajištěny tak, aby správně fungovaly a nepřekážely při používání výrobku,
- pokud uživatel potřebuje ortopedickou pomůcku (límeč, korzet, ortézu, obuv), byla použita pouze na doporučení lékaře.

UPOZORNĚNÍ!

Oblečení musí chránit pokožku uživatele před přímým kontaktem s čalouněním i ostatními částmi zařízení. O použití jakékoliv ortopedické pomůcky může rozhodnout pouze lékař!

6.2 Příprava kočárku

1. Před použitím je nutné:

- rozložit zařízení,
 - zkontrolovat správné upevnění kol a jejich nahuštění; při nedostatku vzduchu je dohustit, přičemž maximální tlak je 2,4 bar,
 - umístit zařízení na rovný povrch umožňující snadný přístup, mimo zdroje ohně a vysoké teploty,
 - ujistit se, že jsou všechny součásti funkční, správně namontované a stabilní,
 - zabrzdit brzdy,
 - nastavit zařízení podle rozměrů uživatele,
 - rozepnout 5bodové bezpečnostní pásy nebo jiné stabilizační a bezpečnostní prvky tak, aby bylo možné uživatele volně umístit do zařízení,
 - umístit uživatele do zařízení,
 - zapnout všechny prvky stabilizující uživatele,
 - nastavit podpůrné a polohovací prvky uživatele (jsou-li součástí),
 - namontovat příslušenství (je-li používáno).
2. U pacientů s problémy s močovým měchýřem je nutné na sedák položit speciální podložku, kterou lze zakoupit v lékárně nebo prodejně zdravotnických prostředků.

UPOZORNĚNÍ!

Před použitím výrobku je nutné zkontrolovat, zda jsou všechny pásy a bezpečnostní prvky správně zapnuty a nastaveny. Ověřte, že se pod tlakem neuvolňují a že jsou všechny svorky nastavitelných prvků pevně utaženy.

Při překonávání překážek, jako je schod nebo obrubník, zvedněte přední kolo stlačením madla dolů. Poté položte přední kolo na překážku a pomocí madla zvedněte zadní část kočárku.

Kočárek nenaklánějte příliš dozadu, protože by mohl ztratit stabilitu. Maximální zatížení kapsy za opěradlem je 1 kg. Kočárek vždy směřujte dopředu. Při používání vždy použijte bezpečnostní poutko na zápěstí a držte madlo, aby se kočárek nemohl samovolně rozjet.

Zařízení funguje správně pouze tehdy, je-li nastaveno podle výšky a hmotnosti uživatele. Správné nastavení je zásadní pro bezpečnost. Dítě nenuťte setrvávat v určité poloze, protože to může být nepohodlné a vést k nesprávnému držení těla. Nesprávné používání výrobku může vést k fixaci patologických posturálních vzorců.

7. Bezpečnostní pravidla

UPOZORNĚNÍ!

Kočárek KUKINI™ musí být používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Před každým použitím připravte uživatele i zařízení.

Je velmi důležité poradit se s lékařem nebo fyzioterapeutem, aby byla správně zvolena velikost a typ kočárku. Před použitím zařízení je rovněž nezbytné seznámit se s pokyny v tomto návodu.

1) Před použitím je nutné:

- ujistit se, že zařízení nemá žádné poškození nebo jiné závady, které by mohly ohrozit život uživatele,
- zkontrolovat, zda všechny části fungují, jsou správně namontované a nejsou poškozené,
- zkontrolovat dotažení všech šroubů, knoflíků a všech lepených, šitých nebo upevňených částí,
- zkontrolovat čalounění, zda nevykazuje známky poškození,
- zkontrolovat správnou funkci brzd,
- zkontrolovat správnou funkci přezek,
- vždy používat bezpečnostní pásy; suché zipy se musí překrývat minimálně 8 cm,
- nastavit zařízení podle rozměrů a potřeb uživatele pomocí nastavitelných prvků,
- ujistit se, že pohyblivé části a nastavovací prvky jsou stabilní a zajištěné,
- zajistit uživatele pomocí prvků výbavy zařízení, aby se zabránilo např. pádu nebo vyklouznutí z kočárku,
- zkontrolovat správné upevnění a nahuštění kol; maximální tlak je 2,4 bar.

2. Je zakázáno používat kočárek k jiným účelům, než pro které je určen.

3. Je zakázáno používat výrobek, pokud není čalounění správně namontováno.

4. Je zakázáno používat poškozený kočárek nebo kočárek s chybějící částí.

5. Je zakázáno ponechat uživatele bez dozoru.

6. Kočárek smí být používán pouze za přítomnosti osoby, která je řádně zaškolená a zná způsob jeho používání.

7. Je zakázáno ponechat kočárek s uživatelem bez dozoru na nestabilním povrchu, a to i při zabrzděné brzdě.

8. Je zakázáno s kočárkem vyjždět nebo sjíždět schody, bez ohledu na to, zda je uživatel v zařízení.



7. Bezpečnostní pravidla

9. Při nastupování do kočárku a vystupování z něj vždy zabrzděte brzdu.
10. Dbejte na to, aby uživatel při nastupování a vystupování nestál na opěrce nohou.
11. Dbejte na to, aby se končetiny uživatele nenacházely v blízkosti paprsků kol nebo jiných nastavitelných prvků.
12. Kočárek skladujte a používejte mimo zdroje ohně a vysoké teploty. Neskladujte jej v místnostech s vysokou vlhkostí.
13. Během přepravy kočárek zajistěte proti poškození. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávné přípravy zařízení k přepravě.
14. Před použitím odstraňte veškeré papírové a plastové obaly. Obal není hračka; uchovávejte jej mimo dosah dětí a zvířat.

UPOZORNĚNÍ!

Nesprávné nastavení výrobku může vést k nežádoucím účinkům, jako jsou mdloby, deformace těla, přetížení kloubů apod. Pokud se tyto příznaky objeví, okamžitě přestaňte výrobek používat, vyjměte uživatele a uložte jej do polohy vleže. Pokud příznaky přetrvávají, neprodleně kontaktujte lékaře. Pokud odezní, informujte o nich ošetřujícího lékaře, aby mohl rozhodnout o dalším rehabilitačním postupu.

Závažné incidenty související s tímto prostředkem musí být hlášeny výrobci i příslušnému orgánu ve vaší zemi.

Je zakázáno ponechávat uživatele v zařízení během přepravy automobilem, autobusem nebo vlakem.

Výrobek obsahuje malé části, které mohou děti spolknout.

Nepoužívejte výrobek, který vykazuje známky poškození, natržení nebo opotřebení. Pouze nepoškozený výrobek a správné používání zaručují správnou a bezpečnou funkci. V případě poškození přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Za žádných okolností nesmí nekalifikovaná osoba výrobek opravovat nebo měnit jeho konstrukci. Na správném stavu zařízení závisí zdraví a bezpečnost uživatele; neodborný zásah vede rovněž ke ztrátě záruky.

Veškerá zavěšená zátěž na madle může způsobit ztrátu rovnováhy kočárku. Maximální zatížení kapsy za opěradlem je 1 kg.

Maximální zatížení úložného koše pod sedadlem je 3 kg. Hmotnost uživatele nesmí překročit maximální hmotnost uvedenou na straně 8.

-
- Akces-MED Ltd. prodává výrobky bez výrobních vad a závad.
 - Výrobce poskytuje kupujícímu záruku 24 měsíců od data nákupu. Veškeré vady zjištěné během záruční doby budou odstraněny bezplatně.
 - Vady vzniklé po skončení záruční doby lze odstranit pouze za úhradu uživatelem. Toto pravidlo se nevztahuje na výrobky hrazené z veřejných prostředků - uživatel může požádat příslušný systém zdravotní úhrady o refundaci.
 - Výrobce stanovuje dobu použitelnosti výrobku na 48 měsíců. Po uplynutí této doby lze výrobek dále používat pouze po jeho zaslání výrobcí ke kontrole/servisu. Výrobce následně znovu stanoví dobu dalšího používání a datum příští servisní kontroly.
 - V případě poškození výrobku kontaktujte prodejce nebo zákaznický servis Akces-MED Ltd.: tel. +48 17 864 04 77, e-mail: export@akces-med.com.

9. Údržba a čištění

Kočárek KUKINI™, který je zdravotnickým prostředkem, musí být vždy udržován v čistotě a používán v souladu s pokyny výrobce. Uchovávejte jej v čisté, suché a větrané místnosti. Údržbu a čištění provádějte alespoň jednou měsíčně. Pravidelné čištění a údržba jsou nezbytné pro zachování správné funkce a bezpečnosti.

Doporučení pro čištění čalounění a ostatních částí kočárku:

1. Ruční praní, chemické čištění nebo sušení bez rozpouštědel při maximální teplotě 40 °C.
2. Před dalším čištěním odstraňte z čalounění přebytečnou vlhkost.
3. K čištění čalounění nepoužívejte tvrdé kartáče.
4. Během používání výrobku neprovádějte čištění, výměnu součástí ani údržbu.
5. Lehké skvrny omyjte vlažnou vodou měkkým hadříkem navlhčeným jemným běžně dostupným čisticím prostředkem.
6. Hadřík nesmí být příliš mokrá, protože by se skvrna mohla zvětšit a mohlo by dojít k poškození čalounění nebo pěny uvnitř.
7. Po vyčištění skvrn čalounění opláchněte vlažnou vodou a osušte čistým hadříkem.
8. Čalounění nečistěte agresivními chemikáliemi, např. rozpouštědly nebo žíravými prostředky na bázi chloru.
9. Kovové a plastové části čistěte ručně vhodnými prostředky po přečtení doporučení výrobce daného čisticího prostředku.

10. Kovové, plastové, dřevěné i čalouněné části výrobku lze dezinfikovat běžně dostupným dezinfekčním prostředkem. Vybraný prvek postříkejte dezinfekcí a otřete suchým čistým hadříkem. Po dezinfekci vyčkejte do úplného vyschnutí, zejména u čalounění. Před použitím dezinfekce vždy na skrytém místě ověřte, zda prostředek nezpůsobí změnu barvy nebo poškození povrchu.

UPOZORNĚNÍ!

Před sejmutím čalounění k praní nezapomeňte vyšroubovat bezpečnostní šrouby na obou stranách rámu kočárku. Po dokončení čištění a opětovném nasazení čalounění je nutné šrouby znovu pevně utáhnout.



POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



imbusový klíč 3



Před použitím je nutné:

- vyčistit kola,
- zkontrolovat správnou montáž základny a kol a ověřit, zda brzda zastaví otáčení kola,
- zkontrolovat, zda konstrukce kočárku není prasklá nebo deformovaná,
- zkontrolovat funkci všech pohyblivých částí a dotažení všech šroubů, matic, knoflíků apod.,
- zkontrolovat, zda pásy, vesty, trupové pásy, stabilizační pásy nohou apod. nejsou roztřepené a zda přezky a svorky fungují správně.

UPOZORNĚNÍ!

Čalounění musí být před použitím vždy zcela suché. Výrobce kočárku Akces-MED Ltd. neodpovídá za škody způsobené použitím nevhodných čistících prostředků. Výrobce odpovídá pouze za skryté vady nebo poškození, které vznikly navzdory dodržení uvedených pokynů. V případě jakéhokoliv poškození kontaktujte osobu, která vám výrobek prodala.



TECHNICKÁ KONTROLA

Technické kontroly provádějte pravidelně. Před servisní kontrolou výrobek důkladně vyčistěte, aby bylo možné odhalit skrytá poškození.

Četnost	Co kontrolovat	Co provést	Poznámky
Před každým použitím	Celkový stav výrobku	Zkontrolujte celý výrobek na viditelné poškození, praskliny a mechanické vady; úplnost výrobku; dotažení všech šroubů, knoflíků, matic a ostatních konstrukčních prvků.	Při zjištění poškození nebo vady výrobek přestaňte používat a kontaktujte dodavatele/distributora nebo výrobce.
Před každým použitím	Kola a brzdy	Zkontrolujte správné upevnění a nepoškozenost kol; zda brzda blokuje otáčení kola; zda kola nejsou znečištěná. V případě potřeby kola vyčistěte.	Při zjištění poškození nebo vady výrobek přestaňte používat a kontaktujte dodavatele/distributora nebo výrobce.
Před každým použitím	Upevnění konstrukčních prvků	Zkontrolujte všechny mechanismy a pohyblivé části, zejména: upevnění sedu, kol a prvků zajišťujících uživatele; funkce pohyblivých částí a nastavovacích mechanismů opěrky hlavy, opěradla, sedu, abdukčního klínu, područek a opěrek nohou (dle výbavy).	Při zjištění poškození nebo vady výrobek přestaňte používat a kontaktujte dodavatele/distributora nebo výrobce.
Před každým použitím	Čalouněné prvky	Zkontrolujte poškození, trhliny, roztržení, uvolněné švy či deformace čalounění; roztržení nebo překroucení stabilizačních a bezpečnostních pásů; správnou funkci přezek a to, že se pásy neuvolňují pod tlakem ani při zatažení.	Při zjištění poškození nebo vady výrobek přestaňte používat a kontaktujte dodavatele/distributora nebo výrobce.
Jednou týdně	Čištění výrobku	Při znečištění rámu a čalounění (prach, bláto apod.) je otřete vlhkým hadříkem bez detergentů. Z pohyblivých částí odstraňte nečistoty, např. vlasy nebo zbytky jídla.	Výrobek čistěte podle potřeby, nejméně jednou týdně. Nepoužívejte prostředky na bázi chloru ani denaturovaný lih. Před použitím zkontrolujte, zda je čalounění suché.

TECHNICKÁ KONTROLA

Technické kontroly provádějte pravidelně. Před servisní kontrolou výrobek důkladně vyčistěte, aby bylo možné odhalit skrytá poškození.

Četnost	Co kontrolovat	Co provést	Poznámky
Jednou měsíčně	Osy kol a rychloupínací prvky	Zkontrolujte, zda se kola volně otáčejí a nejsou uvolněná. Naneste malé množství konzervačního maziva mezi osu a náboj kola. Ověřte, zda lze kola snadno sejmout a znovu nasadit.	Při znečištění kola vyčistěte. Při zjištění poškození nebo vady výrobek přestaňte používat a kontaktujte dodavatele/distributora nebo výrobce.
Jednou měsíčně	Spoje konstrukce (svary, závit, pájené spoje)	Zkontrolujte stav rámu v místech spojů (svary, závit, pájení).	Při zjištění poškození nebo vady výrobek přestaňte používat a kontaktujte dodavatele/distributora nebo výrobce.
Jednou měsíčně	Pneumatiky / duše	Zkontrolujte opotřebení pneumatik a viditelné poškození. Zkontrolujte tlak v pneumatikách.	Je-li tlak příliš nízký, dohustěte pneumatiky na správnou hodnotu. Při poškození výrobek přestaňte používat a kontaktujte dodavatele/distributora nebo výrobce.
Jednou za 6 měsíců	Pohyblivé části konstrukce	Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části poškozené. Ošetřete je vhodným čistícím/údržbovým prostředkem.	Při zjištění poškození nebo vady výrobek přestaňte používat a kontaktujte dodavatele/distributora nebo výrobce.
Jednou za 6 měsíců	Označení výrobku	Zkontrolujte, zda jsou všechna označení a štítky čitelné.	Při zjištění poškození nebo vady výrobek přestaňte používat a kontaktujte dodavatele/distributora nebo výrobce.
Po skončení stanovené životnosti	Podrobná kontrola výrobku	Nechte výrobek zkontrolovat.	Výrobce stanovuje životnost výrobku v uživatelském návodu. Po jejím uplynutí lze výrobek používat pouze po předchozím zasílání výrobci ke kontrole. Výrobce následně znovu stanoví životnost a datum další kontroly.



Prohlášení, že výrobek splňuje základní požadavky



Katalogové číslo



Sériové číslo



Před použitím si přečtěte návod



Je nutné dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření



Výrobce



Datum výroby

MD Zdravotnický prostředek



Výrobek neobsahuje latex



Uchovávejte v suchu



Chraňte před slunečním zářením



Omezení teploty skladování



Relativní vlhkost při skladování



Sušit ve svislé poloze



Nesušit v bubnové sušičce



CL. Nebělit chlorem



Nežehlit



Ruční praní



Prát při maximální teplotě 40 °C



Chemické čištění



Lze použít jakékoliv rozpouštědlo kromě tetrachlorethylenu



Nebělit



Pozor! Křehký / citlivý obsah



Zákaz použití bez zapnutých bezpečnostních pásů



Je zakázáno vyjždět nebo sjíždět schody bez ohledu na to, zda je uživatel v zařízení



Zákaz ponechat uživatele při používání výrobku bez dozoru



Je nutné přečíst doplňující informace



Je nutné stisknout tlačítko zobrazené na fotografii



Je nutné použít nářadí uvedené v montážním popisu

Vzorový výrobní štítek

QR KÓD
PO NASKENOVÁNÍ ODKAZUJE
NA WEB VÝROBCE

VÝROBCE
ADRESA

DATUM VÝROBY MAXIMÁLNÍ POVOLENÉ ZATÍŽENÍ

SÉRIOVÉ ČÍSLO
VE FORMĚ ČÁROVÉHO
KÓDU

NÁZEV VÝROBKU PL NÁZEV VÝROBKU EN



ČÁROVÝ KÓD

OZNAČENÍ
IDENTIFIKACE

SÉRIOVÉ ČÍSLO

VÝROBCE



Akces-MED Ltd.

Jasionka 955 B
36-002 Jasionka
tel. +48 17 864 04 77
e-mail: export@akces-med.com
BDO: 000031619

Autorizovaný prodejce